


# T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

## HBYS Tıbbi Cihaz (ERKAM) Modülü Kalibrasyon Sorgulama



# HBYS (Giriş) Ekranı Tıbbi Cihaz Modülü Seçimi

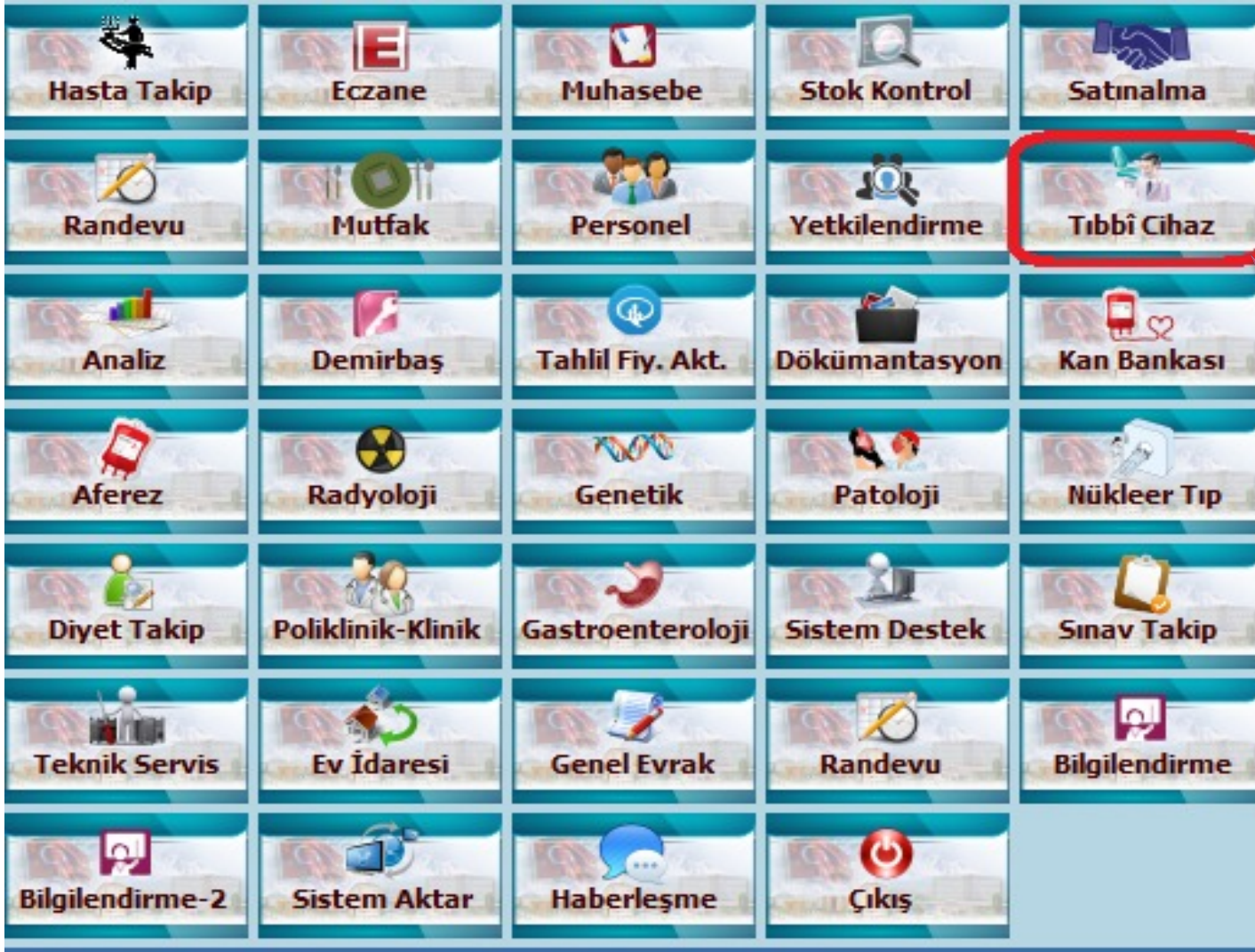

Tıbbi Cihaz Sistemimiz halen eski HBYS üzerinden kullanılmaktadır. Tıbbi Cihaz modülüne giriş yapmanız gerekmektedir.

# HBYS Tıbbi Cihaz Modülü Girişinde Otomatik Açılan Ekran

Bilgilendirme İşlemleri

Min.Gün

KALİBRASYON Bitiş Tarihi Yaklaşan Cihaz Listesi

Biyomedikal Kod	Cihaz Adı	Tarih	Gelecek Tarih	Açıklama	Sertifika	Periyot	Merkez Adı	Ölçüm	Gün
01.030525.13106.2	TANSİYON ALETİ(SPHYGMOI	04.05.2018	04.05.2019		6023	1	ERKAM		96
01.030525.13106.3	TANSİYON ALETİ(SPHYGMOI	04.05.2018	04.05.2019		6021	1	ERKAM		96
01.030525.13106.5	TANSİYON ALETİ(SPHYGMOI	04.05.2018	04.05.2019		6020	1	ERKAM		96
01.030525.13106.6	TANSİYON ALETİ(SPHYGMOI	04.05.2018	04.05.2019		6022	1	ERKAM		96
01.030525.13455.1	TARTI	04.05.2018	04.05.2019		6025	1	ERKAM		96
01.030525.13462.1	BEBEK TARTISI	04.05.2018	04.05.2019		6017	1	ERKAM		96
01.030525.14028.1	LAB TEHERMOMETER THERM	04.05.2018	04.05.2019		6027	1	ERKAM		96
01.030525.14028.2	LAB TEHERMOMETER THERM	04.05.2018	04.05.2019		6026	1	ERKAM		96
01.030525.17116.1	DEFİBRİLATOR (DEFİBRİLLAT	04.05.2018	04.05.2019		6018	1	ERKAM		96
01.030525.17148.1	SPO2(OXİMETERS, PULSE)	04.05.2018	04.05.2019		6019	1	ERKAM		96
01.030525.20169.7	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ(MOI	04.05.2018	04.05.2019		6028	1	ERKAM		96
01.030525.20169.8	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ(MOI	04.05.2018	04.05.2019		6029	1	ERKAM		96
01.030525.20169.9	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ(MOI	04.05.2018	04.05.2019		6030	1	ERKAM		96
01.030525.20169.10	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ(MOI	04.05.2018	04.05.2019		6031	1	ERKAM		96
01.030525.20169.11	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ(MOI	04.05.2018	04.05.2019		6032	1	ERKAM		96
01.020520.13455.1	TARTI ( SCALES)	27.04.2018	27.04.2019		6597	1	ERKAM		89
01.030520.13455.1	TARTI ( SCALES)	27.04.2018	27.04.2019		4796	1	ERKAM		89
05.020520.13106.1	TANSİYON ALETİ(SPHYGMOI	27.04.2018	27.04.2019		6599	1	ERKAM		89
05.020520.13455.1	TARTI ( SCALES)	27.04.2018	27.04.2019		6598	1	ERKAM		89
05.027820.13106.1	TANSİYON ALETİ(SPHYGMOI	27.04.2018	27.04.2019		4935	1	ERKAM		89
05.027820.13106.2	TANSİYON ALETİ(SPHYGMOI	27.04.2018	27.04.2019		4936	1	ERKAM		89
05.027820.13106.7	TANSİYON ALETİ(SPHYGMOI	27.04.2018	27.04.2019		4937	01	ERKAM		89
05.027820.13455.2	TARTI ( SCALES)	27.04.2018	27.04.2019		4938	1	ERKAM		89
05.027820.13462.1	BEBEK TARTISI	27.04.2018	27.04.2019		4934	1	ERKAM		89
05.027820.14028.3	LAB TEHERMOMETER THERM	27.04.2018	27.04.2019		4939	1	ERKAM		89
05.027820.14028.4	LAB TEHERMOMETER THERM	27.04.2018	27.04.2019		4940	01	ERKAM		89

YENİLE

Programa Giriş Yapıldığı anda (default 30 gün), yetkili olduğunuz bölüm, birim, anabirim e göre kalibrasyon zamanı yaklaşan cihazlar ve planlanan kalibrasyon tarihleri listelenmektedir. Gereksemin duyanlar; Bu ekrandan üstteki resimde 100 olarak görülen alandan, kalibrasyon tarihine belirtilen gün kadar kalanlar şeklinde düzenleme/değişiklik de yapabilecektir.

# HBYS Tıbbi Cihaz Modülü - ERKAM Menüsü



Uyarı/bilgilendirme ekranını programı kullanım anında da görmek isterseniz, Tıbbi Cihaz Modülü içindeki ERKAM menüsünde yer alan Bilgilendirme İşlemleri seçeneğinden yine uyarı bilgilendirme ekranına ulaşılabilir.

# HBYS Tıbbi Cihaz Modülü - ERKAM Menüsü

ERKAM	Hakkında	ERÜ
	Anabilim Dalı Tanımları	
	Alt Birim Tanımları	
	ECRI Tanımları	
	Tür Tanımları	
	Marka Tanımları	
	Model Tanımları	
	Cihaz Kartı Açma	
	Envanter Listesi	
	<b>Cihaz Kalibrasyon Sorgulama</b>	
	Cihaz Bakım Sorgulama	
	Cihaz Arıza Sorgulama	
	Bilgilendirme İşlemleri	

Kalibrasyon zamanı yaklaşanlar dışında, yetkili/sorumlu/görevli olduğunuz cihazların kalibrasyon bilgilerini yine Tıbbi Cihaz Modülünde yer alan ERKAM menüsündeki Cihaz Kalibrasyon Sorgulama seçeneğinden takip edebilirsiniz.

# HBYS Tıbbi Cihaz Modülü

## Cihaz Kalibrasyon Sorgulama Ekranı

**Cihaz Kalibrasyon Sorgulama**

Hastane:  Alım Şekli:   
Temel Bilim:  Merkez:   
AnaBilim Dalı:  Alım Tarihi:  Kullanım Kataloğu Var mı?:   
Alt Birim:  Kalib.Tarihi:  Bakım Sözleşmesi Var mı?:   
E.C.R.I:  Gelecek Trh.: 02.12.2019 02.12.2019 Kullanma Talimatı Var mı?:   
Markası:  Kalib.Yap.Trh.:  Sertifika D.No:   
Modeli:  Periyot:   
Aktivitesi:  Ölçüm Aralığı:   
Grup Kodu:  Yapan Kisi:   
Üretici Firma:   
Satıcı Firma:

Bileşen No	Cihaz Adı	Kalibrasyon Sıra No	Tarih	Gelecek Tarih	Sertifika Dosya No	Not
07.073601.15166.4	MİKRO PİPET	3	02.12.2018	02.12.2019	7092	
07.073601.15166.5	MİKRO PİPET	3	02.12.2018	02.12.2019	7085	1
07.073601.15166.10	MİKRO PİPET	3	02.12.2018	02.12.2019	7093	1
07.073601.15166.11	MİKRO PİPET	3	02.12.2018	02.12.2019	7088	1
07.073601.15166.12	MİKRO PİPET	3	02.12.2018	02.12.2019	7083	1
07.073601.15166.13	MİKRO PİPET	3	02.12.2018	02.12.2019	7087	1
07.073601.15166.16	MİKRO PİPET	3	02.12.2018	02.12.2019	7089	1
07.073601.15166.17	MİKRO PİPET	3	02.12.2018	02.12.2019	7090	1
07.073601.15166.18	MİKRO PİPET	3	02.12.2018	02.12.2019	7091	1
07.073601.15166.20	MİKRO PİPET	3	02.12.2018	02.12.2019	7086	1
07.073601.15166.25	MİKRO PİPET	1	02.12.2018	02.12.2019	7082	1
07.073603.15166.1	MİKRO PİPET	3	02.12.2018	02.12.2019	7100	1
07.073603.15166.4	MİKRO PİPET	3	02.12.2018	02.12.2019	7106	1

**ÇEVRE BİLEŞENLERİ**

Sıra	Çevre Bileşeni Adı	Açıklama / Not
------	--------------------	----------------

Cihaz Kalibrasyon Sorgulama seçeneğinde girdiğinizde (yetkili olduğunuz) çeşitli kriterlere göre sorgulamalar yapabilirsiniz. Üstteki örnekte, Gelecek Trh. seçeneğine göre Gelecek kalibrasyon tarihi belirtilen tarih aralığında olan Cihazlar listelenmiştir. Burada listeleme ve sorgulama sonrasında Yazdır butonu ile raporlama işlemi de yapılabilmektedir.

# TEŞEKKÜRLER